

# Configuração rápida - Leitor e sonda TearLab



## Leitor da TearLab

Conecte o cabo de energia em uma tomada normal. Depois, conecte o cabo no leitor. Há um botão para ligar/desligar na parte posterior do leitor. Coloque o interruptor em "Ligado". Para obter informações sobre a bandeja acessória, consulte o Guia de instalação 930095.

## Sonda TearLab

Coloque cada sonda em sua base no leitor, para que as sondas estejam na posição mostrada na foto. As sondas precisam ser carregadas por pelo menos uma hora, antes de você usá-las. Certifique-se de que o leitor esteja conectado e ligado ao carregar as sondas.

## Como usar o teclado do leitor

- Pressione a tecla MENU (☰) uma vez para entrar no modo Menu.
- Pressione (↵) embaixo das setas "para cima" ou "para baixo" para rolar.
- Pressione (OK) para escolher um item do menu.
- Pressione a tecla MENU para retornar à tela principal.
- Quando no modo Teste, pressionar a tecla RECUPERAÇÃO (↵) mostrará os resultados do último teste.

## Cartões de teste



Cada cartão de teste pode ser usado apenas uma vez. O código numérico impresso na parte superior do cartão de teste deverá ser inserido no leitor durante o teste. Os cartões de teste devem ser armazenados na bandeja acessória de cartões de teste encaixadas no leitor, para garantir resultados precisos.

## Soluções de controle



As soluções de controle confirmam que os cartões de teste de osmolaridade estão funcionando corretamente. Os frascos de vidro (ampolas) deverão ser guardados à temperatura ambiente. Não refrigere, nem coloque em um lugar quente.

## Cartões de Verificação Eletrônica



Os cartões de verificação eletrônica são azuis. Dois cartões idênticos são encontrados em cada caixa. Eles podem ser reutilizados para verificar o desempenho do leitor e da sonda. Teste o cartão de verificação eletrônica azul uma vez por dia, antes de fazer o teste em um paciente ou se uma sonda tiver sido derrubada ou manuseada de forma errônea.

# Teste de controle de qualidade

Ao testar a solução de controle ou os cartões de verificação eletrônica, certifique-se de que os resultados correspondam aos valores esperados mostrados nas folhas de instruções. Se não corresponderem, os testes de qualidade foram REPROVADOS. Pare o teste. Entre em contato com o Suporte técnico da TearLab da sua área ou ligue para a TearLab no número **+1-858-455-6006**.

## Cartão de Verificação Eletrônica

Leia a folha de instruções do cartão de verificação eletrônica para obter os valores esperados. Certifique-se de testar os cartões de verificação eletrônica azuis nas duas sondas uma vez ao dia, antes de fazer o teste no paciente. NÃO tente coletar lágrimas ou soluções de Controle com os cartões de verificação eletrônica.

- Encaixe um cartão de verificação eletrônica na sonda.
- A sonda emitirá um bip e uma luz verde acenderá.
- Espere a luz apagar e a sonda bipar novamente.
- Depois que a luz apagar, encaixe a sonda no leitor.
- Pressione (OK).
- Se os resultados forem REPROVADOS, pare o teste. Entre em contato com o Suporte técnico da TearLab da sua área ou ligue para a TearLab no número **+1-858-455-6006**.

## Soluções de controle

Teste ambos os níveis da solução de controle com cada nova remessa de cartões de teste (mesmo se o número do lote for o mesmo), com cada novo número de lote, e mensalmente para verificar o armazenamento. Leia as instruções da folha da solução de controle para obter os valores esperados.

- Encaixe um cartão de teste na sonda (consulte a parte posterior deste guia).
- NÃO colete lágrimas.
- Em vez de coletar lágrimas, use uma solução de controle.
- Utilize o invólucro azul para quebrar a parte superior de uma ampola.
- Vire a ampola de cabeça para baixo (o líquido não se derramará).
- Toque a ponta da sonda na solução de controle.
- Volte a sonda para o leitor, insira o código.
- Verifique o resultado do controle em relação ao valor esperado.
- Se estiver dentro do intervalo esperado, o teste com o paciente pode prosseguir.
- Se não estiver dentro do intervalo esperado, você não deverá realizar o teste com o paciente.

Entre em contato com o Suporte técnico da TearLab da sua área ou ligue para a TearLab no número **+1-858-455-6006**.

**FDA MedWatch.** Relate um evento adverso grave, problema de qualidade do produto, erro de uso do produto ou inequivalência/falha terapêutica que suspeite estar associada com o uso do sistema de osmolaridade da TearLab ao Suporte técnico da TearLab (Tel.: +1-858-455-6006) e/ou ao FDA MedWatch (Tel.: +1-800-FDA-1088), (Fax: +1-800-FDA-0178 ou [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch)).

Fabricado por: TearLab Corporation  
9980 Huennekens St. Suite 100  
San Diego, CA 92121 EUA  
+1-858-455-6006, [www.tearlab.com](http://www.tearlab.com)



Consulte o Manual do usuário da TearLab para obter mais informações.

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP Haia  
Países Baixos

CE

Uma ou mais das seguintes patentes podem se aplicar: Patentes dos EUA 7,017,394; 7,051,569; 7,111,502; 7,129,717; 7,204,122; 8,020,433; 7,987,702; 7,905,134; 7,810,380; 7,574,902




## GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA



# Procedimento de teste TearLab

Use boa higiene ao coletar lágrimas. Descarte os cartões de teste usados em um recipiente adequado.

## Perguntas frequentes (FAQ)

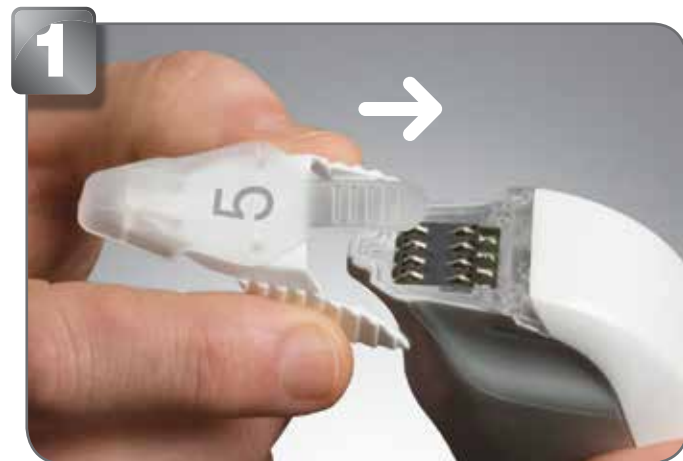


- Encaixe o cartão de teste.



- Segure as abas e remova a cobertura.



- Posicione o paciente sentado, com a cabeça para trás e os olhos para cima.
- **NÃO puxe a pálpebra para longe do olho.**

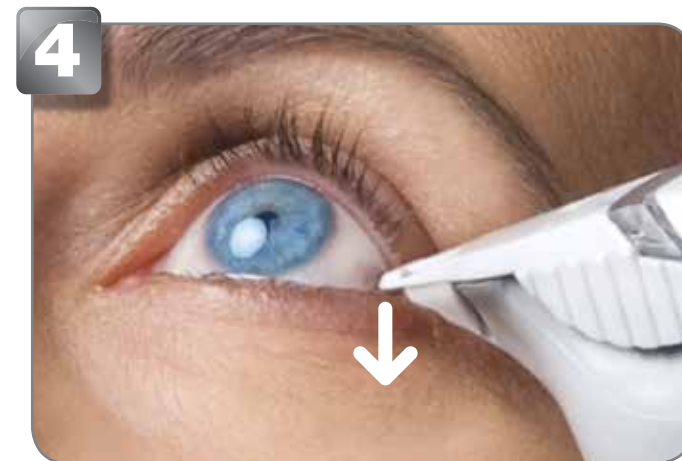



- Abaixar a sonda até a parte inferior da ponta tocar a linha de umidade na parte superior da pálpebra.
- Quando as lágrimas são coletadas, a sonda bipa.



- Encaixe a sonda no leitor.



- Insira o código na parte superior do cartão pressionando  abaixo da seta "para cima" ou da seta "para baixo".
- Pressione .



- Registre o resultado do teste no prontuário do paciente.



- Remova o cartão de teste com o polegar.

### 1. O que é um código de cartão de teste?

O código do cartão de teste é um número impresso na parte superior do cartão de teste e permite que os cartões de teste sejam lidos corretamente. O código do cartão de teste deve ser inserido no leitor no período de oito segundos depois que a sonda tiver sido encaixada na base.

### 2. O que significa se a luz verde na sonda não acender?

Significa que você não deve realizar o teste, a menos que a luz verde esteja acesa.

### 3. Como eu sei se coletei, com sucesso, uma amostra de lágrima?

A luz verde apagará e a sonda emitirá um bipe.

### 4. Por que a sonda começa a bipar novamente depois de eu ter coletado uma lágrima?

O tempo da sonda está prestes a se esgotar. Isso quer dizer que você tem apenas dez segundos para colocar a sonda na base, antes de as informações do teste serem perdidas.

### 5. Como eu sei se a sonda foi encaixada com êxito na base?

O leitor bipará.

### 6. Como eu determino se um cartão de teste já foi usado?

Um cartão de teste sem uma cobertura protetora deve sempre ser considerado usado.

### 7. Com que frequência eu testo o cartão de verificação azul?

Teste o cartão de verificação eletrônica azul uma vez por dia, antes de fazer o teste em um paciente ou se uma sonda tiver sido derrubada ou manuseada de forma errônea.

### 8. Com que frequência eu devo testar as soluções de controle?

Teste ambos os níveis da solução de controle com cada nova remessa de cartões de teste (mesmo se o número do lote for o mesmo), com cada novo número de lote, e mensalmente para verificar o armazenamento.

### 9. Depois de ter coletado uma lágrima, importa o lado em que eu encaixo a sonda?

Não. Você verá os resultados do teste na tela LCD no lado em que a sonda está encaixada.

### 10. Qual é a higiene adequada para fazer o teste?

Sempre lave as mãos e mantenha o cartão de teste TearLab limpo. Leia o folheto de instruções do cartão de teste TearLab para obter mais informações.

### 11. Como eu devo armazenar os cartões de teste?

Os cartões de teste devem ser armazenados na bandeja acessória de cartões de teste encaixadas no leitor, para garantir resultados precisos. Armazene cartões de teste extras na temperatura ambiente. Preste atenção à data de validade impressa na caixa e em cada pacote. Nunca use um cartão de teste depois da data de validade.

### 12. E se for REPROVADO no controle de qualidade?

Pare o teste. Entre em contato com o Suporte técnico da TearLab da sua área ou ligue para a TearLab no número +1-858-455-6006. Consulte o Manual do usuário para obter informações sobre solução de problemas e manutenção.